

## SANGLE DE REHAUSSEMENT AU LIT

RÉFÉRENCE  
SI21680

Utilisée avec des patients ayant une faible capacité de participation, la sangle POULIE® permet au soignant d'effectuer un rehaussement au lit seul et en toute simplicité.

Le sangle POULIE® doit être placée sous le fessier du patient afin que la sangle glisse aisément à l'intérieur du fourreau pour effectuer le rehaussement.

Si on l'associe à un drap de transfert MULTIGLIDE®, elle permet de rehausser sans effort, des personnes à forte charge pondérale ou en incapacité totale de rehaussement ■




### LES + PRODUIT

Protège efficacement le dos de l'aidant contre les mauvaises postures.

Installation facile et utilisation intuitive : geste du tir à la corde.

Les poignées apportent une prise en main agréable et ergonomique et permettent un maintien constant de la sangle dans le fourreau.

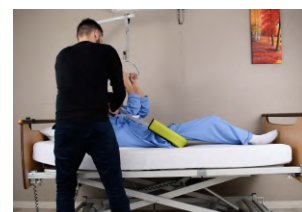

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

### OPTION


#### MULTIGLIDE



Peut être associée à un drap de transfert MULTIGLIDE® pour faciliter le rehaussement ou à une potence de lit.



VOTRE CONSEILLER



#### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	POULIE®
DESCRIPTION COURTE :	SANGLE DE REHAUSSEMENT AU LIT
RÉFÉRENCE :	SI2 1680
DATE DE MISE À JOUR :	14/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370915
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	300G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET OCCITANIE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne d'un sujet présentant une faible capacité de participation au rehaussement au lit ou une surcharge pondérale importante. Attacher la sangle à un point fixe de la structure du lit. Peut-être positionnée à côté du lit, toujours attachée, lorsqu'elle n'est pas utilisée.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b> <b>Après utilisation, la sangle POULIE® ne doit pas rester sur le sol ni dans le lit.</b> <b>Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. Pour la sangle : Lavage à 60° en machine. Séchage à l'air libre. Pour le fourreau : Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Polypropylène, nylon enduction PVC, polyester, polyester enduction PVC, jersey polyester enduction PVC. Une mousse de 1 cm d'épaisseur assure le confort de la sangle. Poignées : mousse polyuréthane.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant une sangle de rehaussement au lit POULIE® et sa fiche technique.
DIMENSIONS :	Sangle : 240 cm x 38 mm Fourreau : 60 x 10 cm
COULEUR :	Vert, noir, gris.